


INSTRUCCIONES DE USO DEL INHALADOR PRESURIZADO CON CÁMARA EN NIÑOS



- 1 Retirar el tapón del inhalador

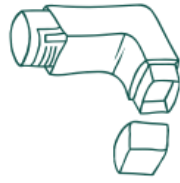

- 2 Agitar unos 10 segundos



- 3 Acoplar el inhalador a la cámara

<3-4 AÑOS

CÁMARA + MASCARILLA

- 4 Colocar la mascarilla alrededor de boca y nariz, bien acoplada.



NIÑOS COLABORADORES (>3-4 AÑOS)

BOQUILLA DE LA CÁMARA

- 4 Expulsar el aire de los pulmones +
Situarse la boquilla de la cámara en la boca, cerrando bien los labios.



- 5 Pulsar el inhalador UNA vez.
- 6 Mantener la cámara colocada mientras el niño RESPIRA 5-6 VECES.
- 7 Si necesita NUEVAS DOSIS repetir el procedimiento con un intervalo de entre 30-60 SEGUNDOS entre cada dosis.
- 8 Retirar el inhalador de la cámara, taparlo y lavar con agua la boca.



LIMPIEZA DE LA CÁMARA

Limpiarla al menos una vez a la semana con agua tibia jabonosa



Enjuagarla con agua



Dejarla secar al aire sin frotar o secarla con un secador

RECUERDA:

EN PEDIATRÍA SIEMPRE CON CÁMARA ESPACIADORA,
NUNCA EL INHALADOR DIRECTAMENTE A LA BOCA

